

TERMÉKISMERTETŐ, HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

TENA *Comfort* betét



A **TENA *Comfort*** termékcsaládba tartozó **termékváltozatok** kimondottan a súlyos vizeletinkontinencia tüneti ellátására tervezett - **komfortos** és ergonomikus felhasználású – **speciális gyógyászati segédeszközök**. Alkalmazásuk az önálló tüneti kezelésben igen előnyös, segítségükkel a szokásos mindennapi életvitel visszaállítható és fenntartható, rendszeres és megfelelő használatuk biztonságérzetet, diszkréciót kölcsönöz az érintettek számára. Magyarországon a **TENA *Comfort* termékcsalád** 4 - méretarányosan növekvő - vizeletfelszívó képességű **termékváltozata** érhető el: **Plus**-legkisebb, **Extra**-közepes, **Supernagy**, **Maxi**-legnagyobb.


A **TENA *Comfort*** a betegek testi, pszichés és társas mivoltából adódóan kiegyensúlyozott és jó megfelelést adó anatómiailag formázott, magas effektív teljesítményű inkontinencia betét. **Külső és belső szerkezete**, anyagösszetétele védelmet nyújt a vizeletinkontinenciában szokványos kellemetlen és zavaró – túlsordulásos, illesztési hiba eredetű, stb. - **vizeletszivárgás és szagok ellen**.

A termék összességében a rendszeres és tartós önálló alkalmazással együtt járó szakmai és betegoldali igényeknek kiemelkedő megfelelést nyújtó, kiváló nedvszívó és folyadékmegkötő teljesítményű inkontinenciabetét. Használata a biztonságos, ergonomikus és komfortos mindennapi felhasználás egyedi kombinációját nyújtja a betegek számára.



A TENA Comfort betétek főbb szerkezeti és funkcionális jellemzői:

1. **Bőrbarát, nemszótt textília felső réteg:** A vizeletet a nedvszívó rétegbe vezeti, szárazon tartja a bőrt.
2. **Dupla cellulóz mag:** A felső mag a beérkező folyadékot gyorsan elvezeti, az alsó mag biztonságosan megtartja.
3. **Feel DryTM réteg:** Elősegíti a gyors folyadékelfvezetést, ezáltal szárazon tartja a pelenka bőrrrel érintkező felületét, így óvja a bőrt a nedvességtől.
4. **Vízhatlan, teljesen légáteresztő külső borítás:** A betétet alul légáteresztő, vízhatlan réteg zárja, mely véd az átnedvesedéstől, de engedi a bőrt lélegezni, hozzájárulva ezzel a bőr egészségéhez.
5. **Fészekformát kialakító körgumírozás:** Segít a test vonalát követő fészekforma kialakításában, amely biztosítja a megfelelő illeszkedést és szivárgásmentességet.
6. **Nedvességjelző indikátorcsík:** Használatával elkerülhető a felesleges pelenkacsere. Az indikátorcsík elszíneződése mutatja, hogy a termék telítődött.
7. **Méret- és nedvszívó kapacitás jelölése a terméken:** A termék a csomagolásból kivéve is könnyen beazonosítható.
8. **Szagsemlegesítő rendszer:** A szagsemlegesítő rendszer csökkenti az ammóniaszagot, így megőrizve a friss érzést és a méltóságot.
9. **Anatómialilag formázott:** A test anatómiájának megfelelően kialakított betét forma jó illeszkedést biztosít, így biztonságot és kényelemérzetet nyújt.

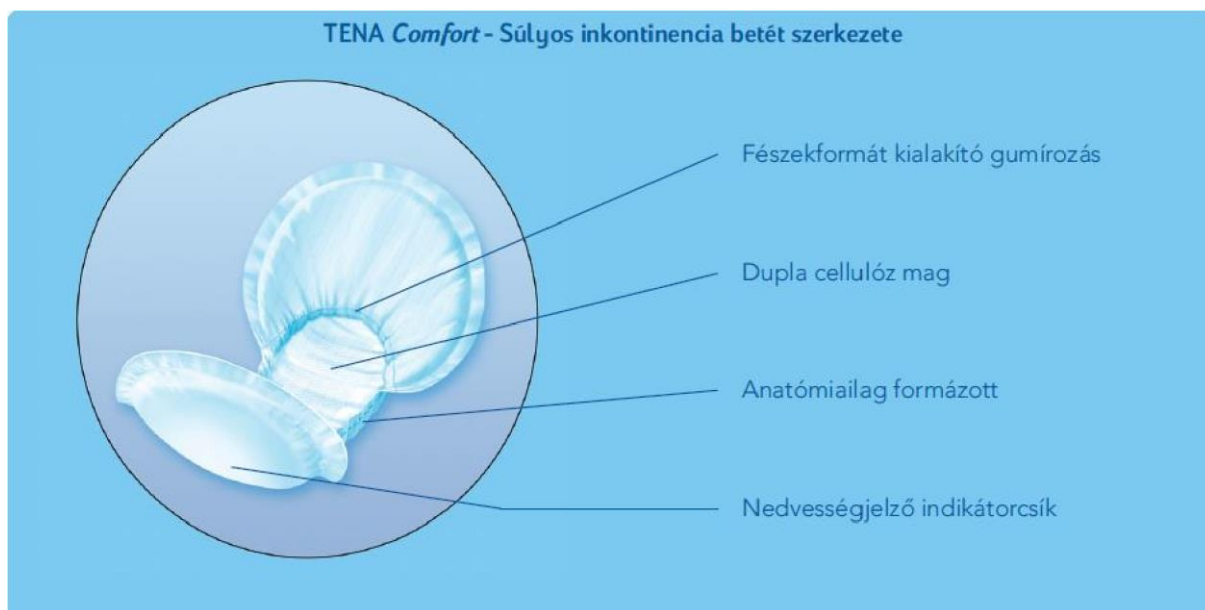

A TENA *Comfort* termékek CE minősítéssel rendelkeznek, az európai szabványnak megfelelnek. A terméket előállító, Essity Hygiene and Health AB gyártó egységei ISO 9001 minőségi tanúsítvánnyal rendelkeznek. A termékek szavatossági ideje a gyártástól számított 3 év.

A termék biztonságos rögzítésének optimális módja a TENA *fix* rögzítőnadrág, amely 5 méretben (S, M, L, XL, XXL) kerül forgalomba. Ez a nadrág lehetővé teszi a bőr szellőzését. Mindez jelentősen javítja a beteg biztonság- és kényelemérzetét és segíti a gondozója munkáját. A rögzítőnadrág mosható, megfelelően kezelve (mosószákban max. 60 C° fokon mosható) tartósan formatartó, akár 50 alkalommal felhasználható.

FELHELYEZÉSI ÚTMUTATÓ

A TENA *Comfort* betét cseréjét szükség szerint végezzük a következő módon: *Álló páciens esetén:*

Távolítsa el a használt terméket és tisztítsa meg a bőrt TENA Bőrápoló termékekkel.

1. A csomagból kivéve hajtogassa és simítsa ki a terméket. Húzogassa meg kicsit hosszanti irányban, hogy a fészekforma kialakuljon és a cellulóz pelyhek fellazuljanak a termékben, majd a betétet húzza be a beteg combjai közé.
2. A TENA *fix* rögzítőnadrágot húzza combközép magasságig és hajtsa vissza a térd felé. A nadrág varrása kívül helyezkedjen el.
3. Igazítsa el elöl is a betétet.


4. Húzza fel a TENA *fix* rögzítőnadrágot a betegre és simítsa el a betétet hátul úgy, hogy az jól illeszkedjen a testhez. Combhajlatba igazítva a nadrágot biztosítsa a kényelmes viseletet.



Fekvő páciens esetén:

Távolítsa el a használt terméket és tisztítsa meg a bőrt TENA Bőrápoló termékekkel.

1. A csomagból kivéve hajtogassa és simítsa ki a terméket. Húzza meg kicsit hosszanti irányban, hogy a fészekforma kialakuljon és a cellulóz pelyhek fellazuljanak a termékben.
2. Ha ápolója képes megemelni az ülepét, helyezze előlről hátrafele irányba a Comfort betétet az ágyékrészhez. Ha erre nem képes, fordítsa a beteget stabil oldalfekvésbe és így helyezze be a betétet a lábak közé.
3. Kérje meg ápolóját, hogy enyhén emelje meg az ülepét és húzza fel a testméretnek megfelelő TENA *fix* rögzítőnadrágot. Elöl és hátul is simítsa el a betétet. Ha ápolója nem képes enyhén megemelni az ülepét, oldalfekvő helyzetben húzza fel a nadrág egyik felét, majd fordítsa hátára a beteget, húzza fel a másik oldalon és elöl is a rögzítőnadrágot és simítsa el a betétet úgy, hogy az tökéletesen illeszkedjen a testhez
4. Combhajlatba igazítva a nadrágot biztosítsa a kényelmes viseletet.

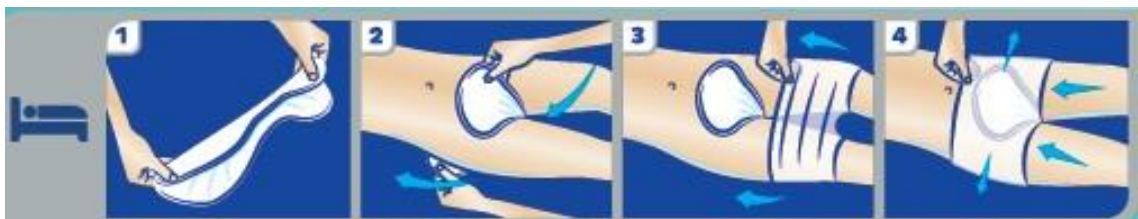

Bármilyen, az eszköz használatával kapcsolatban előforduló súlyos váratlan eseményt kérjük, jelentsen az illetékes helyi hatóságnak (Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ; (NNGYK), 1135 Budapest, Szabolcs utca 33., Tel.: (1) 8869-300, E-mail: amd.vig@ogyei.gov. hu, 1372 Postafiók 450

Forgalmazza: Essity Hungary Kft. 1021 Budapest, Budakeszi út 51. További információk: www.tena.hu, INKO-INFO: 06-80-20-10-20 (ingyenesen hívható zöldszám)

Jelen használati útmutató lezárásának dátuma és azonosítója: 2024.03.22, Azonosító: HMS/INKO/L/Print/220324/8