


TENA LADY PANTS PLUS NOIR (Fekete) PELENKANADRÁG – HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

A TENA Lady Pants Plus Noir (Fekete) pelenkanadrág gyógyászati segédeszköz, orvostechnikai eszköz. A kockázatokról olvassa el az alábbi használati útmutatót vagy kérdezze meg kezelőorvosát!

A TENA Lady Pants Plus Noir (Fekete) pelenkanadrág diszkrét és biztonságos védelmet jelent vizelettartási probléma esetére. A hármas védelem garantálja, hogy vizeletvesztés esetén a szivárgás, a kellemetlen szagok és a nedvesség is hamar eltűnjön. Termékválasztásnál figyeljen arra, hogy vizeletvesztés súlyosságának megfelelő terméket válassza. Bontsa fel a csomagolást, majd vegye ki a terméket.

1. Vegye fel a terméket úgy, mint egy hagyományos fehérneműt.
2. Levételkor tépje fel az oldalvarrást.
3. Tekerje össze a használt terméket.
4. Dobja a háztartási hulladékba a fehérnemű-pelenkanadrágot. Ne dobja a toalettbe!

A termék a csomagoláson jelzett időpontig használható fel. A terméket száraz, hűvös helyen tárolja. A termék gyermekektől távol tartandó. A fulladás veszélyének elkerülése érdekében ne hagyja gyermekét felügyelet nélkül a termékkel vagy a csomagolással játszani.

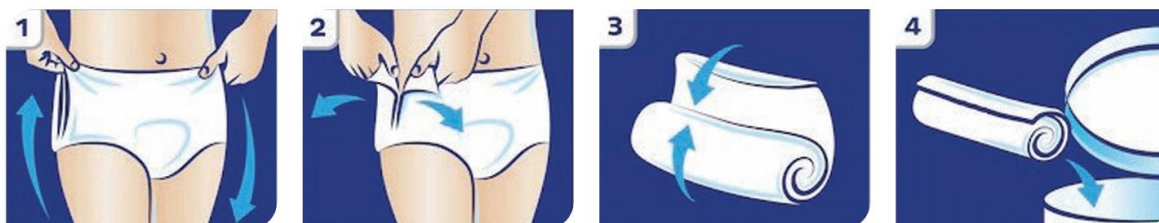

Dermatológiailag
tesztelt



Parfüm-
mentes



www.tenalady.hu

Essity Hungary Kft.
1021 Budapest, Budakeszi út 51.
INKO-INFO: 06-80-20-10-20
(ingyenesen hívható zöldszám)

essity