

TERMÉKISMERTETŐ, HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

TENA Men Level 3 – egyszerhasználatos hímvesszőpelenka

Az **egyszerhasználatos hímvesszőpelenkák** rutinszerű alkalmazása segítséget nyújt a **férfi vizeletinkontinencia** tüneteinek kezelésében, így - adott esetben - az **érintettek** társas, családi és kereseti szerepkörének megóvásában is¹.

A **TENA Men hímvesszőpelenkák** olyan **gyógyászati segédeszközök** melyeket kimondottan a **férfi vizeletinkontinencia** tüneteinek ellátására fejlesztettek ki.

A **normál férfi alsóneműbe** rögzített, elegendően nagy nedvszívású – helyesen megválasztott *TENA Men termékváltozat* alkalmazása révén a vizeletinkontinencia olyan árulkodó jelei, mint az öltözéken megjelenő nedves foltok, vagy a jellegzetes vizelet szag egyszerűen kivédhetők.

TENA Men termékváltozatok formája lényegileg eltér a különféle női betétektől és a felnőtt (inkontinencia) pelenkanadrágok – nadrágpelenkák esetén megszokottól egyaránt. Speciális - anatómiai - formázottságuk és a **férfi életvitelhez idomuló használati módjuk a vizeletinkontinencia önálló és diszkrét kezelési lehetőségét teremti meg az érintettek számára.**

A *TENA Men termékváltozatok* a normál **férfi alsóruházat hétköznapi kiegészítéseként működnek**. A termékcsalád használatával elérhető előnyöknek a **férfi lét - anatómiai, pszichoszociális és életviteli** – sajátosságai alapján felépülő gyártástechnológia és az ebből adódó termékteljesítmény, valamint a megfelelő beteggyüttműködés együttesen adja az alapját. A mindennapok szintjén mindez azt jelenti, hogy a terméket rendeltetésszerűen használó **férfiak alig, vagy csak minimális mértékben kell változtassanak addigi öltözködési és életviteli szokásaikon**, miközben vizeletvesztéses panaszaikra is megoldást találnak. A kezelésnek ezt a módját elfogadó betegeknél a jól (urológus, vagy más szakorvos segítségével) megválasztott termék (kellő begyakorlás utáni) mindennapos használatával a tünetek egyszerűen palástolhatók.

Társadalombiztosítási támogatással hazánkban *3 különböző TENA Men termékváltozat* érhető el. Ezek közül **kiemelkedően magas - 700 ml feletti - nedvszívó kapacitást a TENA Men Level 3** nyújt, ami már inkább a **középsúlyos férfi vizeletinkontinencia** tüneti kezeléséhez ajánlható. A TENA Men „2” és „1” termékváltozatainak mérete és nedvszívókapacitása rendre kisebb, megjelenésük ezzel arányban diszkrétebb. A TENA Men „2” és „1” termékváltozatok - csökkenő sorban – az egyre enyhébb férfi vizeletinkontinencia kezelésére használatosak. A **TENA Men Level 3 (710 ml) jelentőségét az adja, hogy a tartós és eredményes kezelés reális lehetőségét nyújtja még olyankor is, ha ehhez objektív – szakorvos által feltárt - okból**

valóban komolyabb nedvszívó kapacitásra volna szükség, de a beteg, pl. önérzeti okból a **nadrágpelenka viselésétől elzárkózik – ódzkodik²**.

A TENA Men Level 3 – megfelelően elsajátított és kivitelezett eszközhasználat mellett – az addigi, aktív és férfias életvitel szinte törésmentes folytatását teszi lehetővé, még középsúlyos vizeletinkontinencia esetén is. Ezt a termék **precíz anatómiai megformáltsága, magas (710 ml) nedvszívása**, diszkrét dizájnya **fajlagosan rendkívül kis mérete**, és **egyeseivel csomagolt kialakítása** együttesen teszik lehetővé. Az innovatív részmegoldások sorából kiemelendő a termék speciális **Odour Control®** rendszere, ami a jellegzetes vizeletszagért felelős ammóniaképző baktériumok szaporodását fékezi, míg **a termék egyéb műszaki megoldásai a szivárgások blokkolásáért felelnek**, akár a felszívott folyadékról, akár az „elzilipelendő” szagokról legyen is szó.

1: Moore KC, Lucas MG. Management of male urinary incontinence. *Indian J Urol.* 2010;26(2):236–244. doi:10.4103/0970-1591.653982

2: Az Emberi Erőforrások Minisztériuma szakmai irányelve a felnőttkorban előforduló, nem neurogén eredetű vizeletinkontinenciáról,

5.2. AZ ESZKÖZ FŐBB SZERKEZETI ÉS FUNKCIONÁLIS JELLEMZŐI: A termék olyan speciális hímveszőpelenka, mely a kimagasló nedvszívó teljesítményét az egyedülállóan diszkrét használat (fajlagos kis méret, egyenkénti csomagolás, modern-férfias design) lehetőségének megtartása mellett képes garantálni. Rutinszerű alkalmazása ergonomikus és biztonságos megoldás a **középsúlyos vizeletinkontinens önellátó férfi betegek korszerű kezelésében**. (ld.: EMMI 000784 irányelv). Használata **a nadrágpelenka használatától ódzkodó férfiak számára lehet igen előnyös**.

- **Anatómiai formázottság:** A termék a férfi test jellegzetességeinek megfelelő illeszkedést – fajlagosan kis méret mellett - biztosít a komfortos, biztonságos és diszkrét használat érdekében.
- **Nemszőtt-textil fedőréteg:** A testtel közvetlenül érintkező felület a bőr légzését segíti, irritációmentes viseletet biztosít, puha - mikrobolyhos - felszíne növeli a vizeletfelvevő felületet is.
- **Oldalgumírozás:** a kényelmes és stabil illeszkedést a kétoldali puha-oldalgumírozás biztosítja az ágyék-comb áthajlásban, Ez egyben az oldalirányú folyadékkúszást is gátolja, izolál.
- **Dupla cellulóz mag:** A külső cellulózmag az oda érkező vizeletet összegyűjti és kapillárisaival azonnal a belső mag felé vezeti, ez utóbbi tartalmazza a szuperabszorbenst is. A belső cellulóz-magba zárt vizelet a normál testmozgásból adódó nyomásviszonyok mellett nem szivároghat vissza.
- **Szagsemlegesítő (Odour Control®) rendszer:** A szuperabszorbens mag kémhatása a szabad ammónia felhalmozódásáért felelős baktériumok szaporodását fékezi, emellett az ammónia bomlását aktívan is elősegíti. A típusos szűrős vizeletszag kialakulását két irányból is gátolja.

- **Microperforált borítás:** A hímvesszőpelenka külső oldalát mikroperforált borítás fedi. Ez blokkolja a vizelet átszivárgását a ruházat irányába, miközben lehetővé teszi a bőr normál légzését.
- **Rögzítő elemek:** a hímvesszőpelenka egyszerűen behelyezhető a férfi alsóneműbe a borításon található öntapadó csík segítségével, a ragasztó-védőfólia eltávolítása után a termék erősen és könnyen rögzíthető, jól tapad a textil felületekhez. A száraz alsóneműbe beragasztott hímvesszőpelenka mozgás közben is a helyén marad, a vizeletvesztés mértékétől függetlenül.



TENA Men Level 3 – Középsúlyos inkontinencia betét



Hármas védelem a szivárgás, a kellemetlen szagok és a nedvesség ellen



A férfitest anatómiáját követő fészek forma, amely pontos illeszkedést tesz lehetővé



Vékony és diszkrét



Egyesével csomagolt, fenntartható csomagolóanyagban



Informatív lehúzócsík a ragasztásról

A TENA Men Level 3 **anatómiailag formázott**, a férfi genitáliákhoz illeszkedő betét. A belső, lágy textilfelület különleges komfortérzést nyújt, teljes mértékben **bőrbarát**. A vizelet felszívását cellulóz alapanyagú **nedvszívó réteg** biztosítja. A betét belsejében lévő poliacrilát alapú szuperabszorbens megköti a folyadékot, így a betét felszíne száraz marad. A TENA Men Level 3 **légáteresztő külső borítása** biztosítja a bőrbarát, kényelmes viseletet.

A termék a fehérneműbe illeszthető, **biztonságosan rögzíthető**, ezáltal kényelmesen és észrevétlenül viselhető. A betétek **egyesével csomagoltak**, így higiénikusan, diszkrétan kezelhetők és szállíthatók.

A biztonság- és komfortérzet a középsúlyos inkontinenciában szenvedő, de aktív ember számára visszaadja a lehetőséget a társadalmi életben, a munkában való tevékeny részvételre – ez jelentősen javítja mind az érintett, mind a környezete életminőségét.

A TENA Men betétek CE minősítéssel rendelkeznek az európai szabványnak megfelelően. A terméket előállító, Essity Hygiene and Health AB egységei ISO 9001 minőségi tanúsítással rendelkeznek. A termék szavatossági ideje a gyártástól számított 3 év.

TENA Men Level 3 termék nedvszívó kapacitása: 710 ml



Alapanyag százalékos összetétele:

Cellulóz (61,83%), Szuperabszorbens (26%), Borítóanyag (nemszőtt textília) (3,84%), Egyéb (Ragasztóanyag, rögzítő szalagok, elastikus szálak: 8,34%)

FELHELYEZÉSI ÚTMUTATÓ

TENA Men Level 3

1. Az elhasznált terméket távolítsa el. Nyissa ki a TENA Men Level 3 betét csomagolását, vegye ki és hajtsa szét a betétet.
2. Tisztítsa és ápolja a bőrt TENA Bőrápoló termékekkel.
3. Helyezze a genitáliákat a betétbe.
4. Húzza le a papírcsíkot a ragasztóbevonatról. Ügyeljen arra, hogy a betét szélesebb része felül helyezkedjen el.
5. Helyezze a betétet a fehérneműbe úgy, hogy a ragasztócsík az alsónadrág elülső részéhez illeszkedjen. A terméket simítsa kényelmesre, gyűrődésmentesre. Használjunk testhezálló alsónadrágot a vizelet kifolyásának elkerülése érdekében.

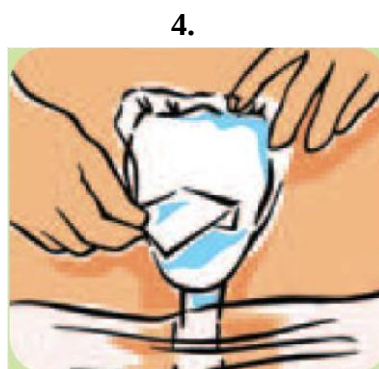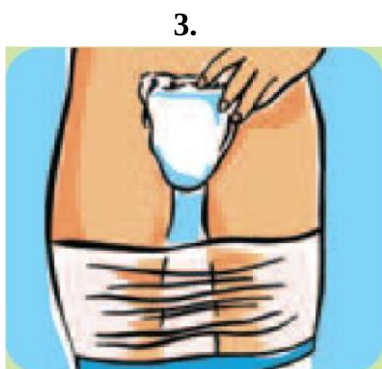

Az eszközzel kapcsolatban előforduló súlyos váratlan eseményeket az Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központnak tudja bejelenteni az ogyei@ogyei.gov.hu címen.

Forgalmazza: Essity Hungary Kft. 1021 Budapest, Budakeszi út 51.

További információk: www.tena.hu, INFO: 06-80-20-10-20 (ingyenesen hívható zöldszám)

Gyártó: Essity Hygiene and Health AB (címe: SE-405 03, Göteborg, Sweden)

Használati útmutató 2023. 05.09.